



**DE GIDS NAAR THERAPIETROUW:
BEHANDELING VAN VENEUZE AANDOENINGEN**

SIGVARIS MEDICAL

SIGVARIS

OVERZICHT

SIGVARIS	1
PREVALENTIE VAN VARICES	2
ANATOMIE EN FYSIOLOGIE VAN HET VENEUZE SYSTEEM	3
MEDISCHE COMPRESSIE	4
DE INDICATIES	5
HET INTELLIGENTE TEXTIEL VAN SIGVARIS	6
DE MEDISCHE EXPERTISE VAN SIGVARIS	7
EEN COMPLEET AANBOD	8
OVERZICHT VAN HET GAMMA	10
MAATNAME	13

DE MEDISCHE COMPRESSIE

PRODUCTEN - DAMES

KLASSE 1	15
KLASSE 2	21

PRODUCTEN - HEREN

KLASSE 1	25
KLASSE 2	29

PRODUCTEN - UNISEKS

KLASSE 1	33
KLASSE 2	35
KLASSE 3	39
KLASSE 4	43

SPECIALS	45
----------------	----

MAATTABELLEN	52
--------------------	----

SIGVARIS

Verzorging door actief textiel

SIGVARIS is een internationale Zwitserse groep gespecialiseerd in ontwerp, fabricage en commercialisatie van compressietextiel. Ze bestaat reeds 150 jaar. De Franse dochteronderneming, al ruim 100 jaar gevestigd in het historisch kenniscentrum van de textielindustrie, is het vlaggenschip van de SIGVARIS Group.

Gedreven door haar innovatieve, menselijke en ethische bedrijfswaarden, creëert SIGVARIS vernieuwende en efficiënte compressiekousen die het welzijn en de gezondheid van mannen en vrouwen bevorderen. Als historisch leider op het gebied van compressiekousen heeft Sigvaris haar kennis vertaald naar andere vakgebieden.

Zo heeft het bedrijf zich gevestigd op de markt van sportcompressie met innovatieve oplossingen die leiden tot een betere sportprestatie en een sneller herstel.


SIGVARIS betrad ook de wellness-markt met een nieuwe vorm van cosmetische dameskousen voor dagelijkse verzorging van de benen.




PREVALENTIE VAN VARICES (1)

Afhankelijk van bevolking, selectiecriteria, definitie van ziekten en gebruikte meettechnieken wordt de prevalentie van varices geschat tussen **20% en 40% van de bevolking of 1 op 3 personen.**

PREVALENTIE IS GESLACHTS- EN LEEFTIJDGEBONDEN

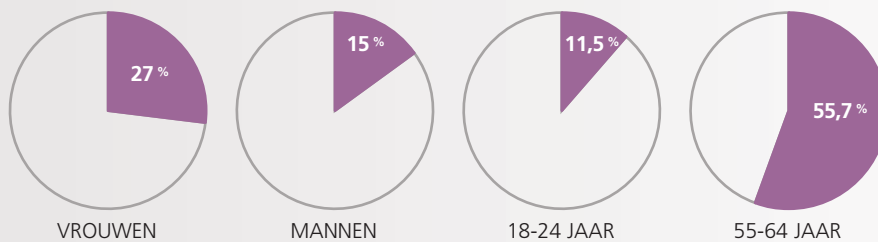


PREVALENTIE NEEMT AF NAARGELANG DE ERNST VAN DE ZIEKTE

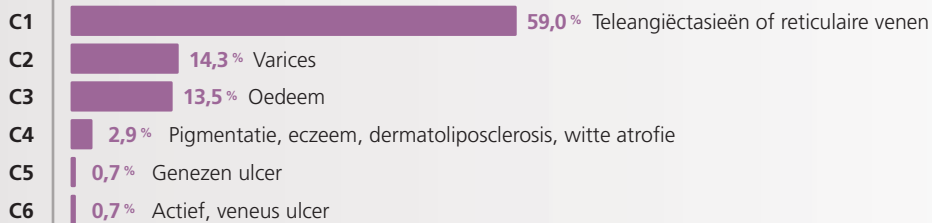

(1) Allen F, Kroes M, Mitchell S, Mambourg F, Paulus D. Diagnose en behandeling van spataders in de benen. Good Clinical Practice (GCP). Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). 2011. KCE Reports 164A. D/2011/10.273/50.

ANATOMIE EN FYSIOLOGIE VAN HET VENEUZE SYSTEEM

Het effect van verschillende posities en bewegingen op het veneuze systeem

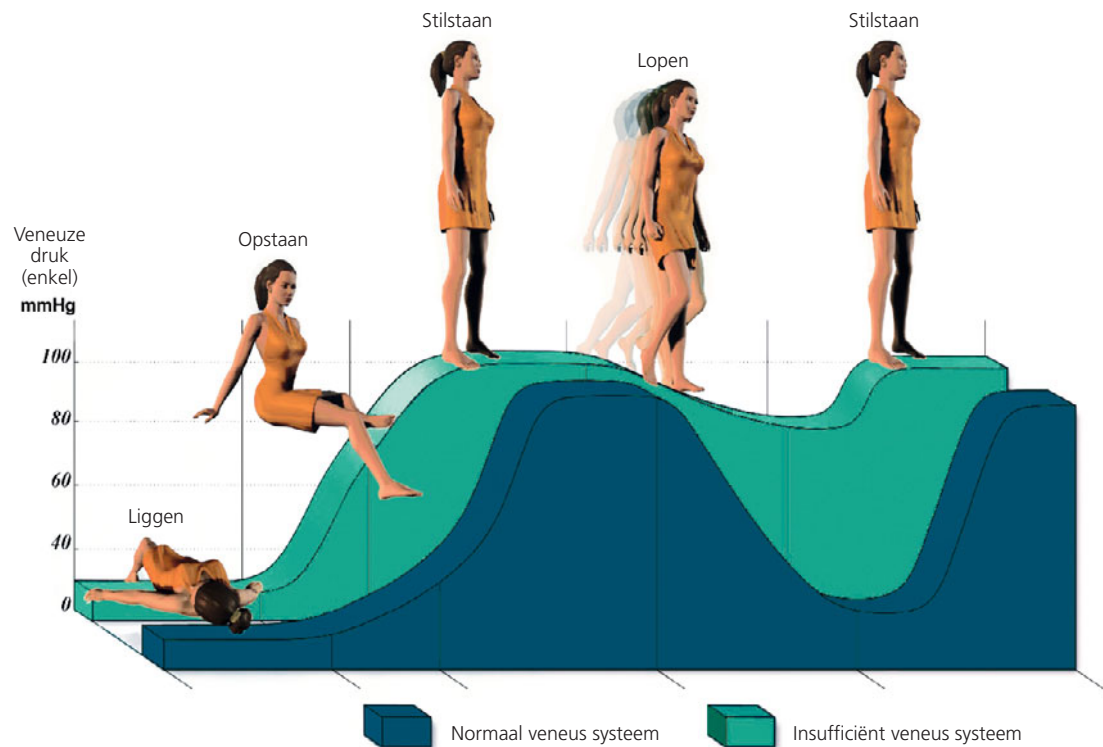


MEDISCHE COMPRESSIE:

MECHANISCHE THERAPIE GESCHIKT
VOOR ALLE PATIËNTEN, VEROORZAAKT
GEEN INTERACTIE MET MEDICATIE

EEN DRIELEDIGE DOELSTELLING

Externe **degressieve tegendruk** bieden om de effecten van veneuze hypertensie te reduceren ⁽¹⁾:

- Veneuze terugkeer stimuleren
- Bloedstagnatie voorkomen
- Aantasting van de aderwand tegengaan

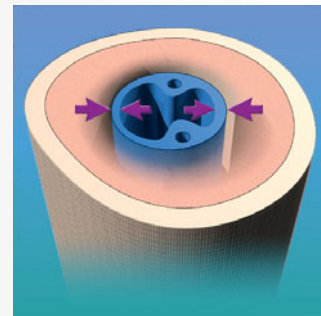

ERKENDE PREVENTIEVE EN THERAPEUTISCHE VOORDELEN

- Verminderen van het **risico op diep veneuze trombose** en dus op **longembolie** ⁽²⁾
- Verzachten, voorkomen en verminderen van **pijn en oedeem** ⁽³⁾
- Verbeteren van de **levenskwaliteit** ⁽³⁾



© Virginie Dentis

(1) Société Française de Phlébologie. Communiqué de Presse de la 3^e semaine nationale d'information et de prévention des maladies veineuses, mars 2006.

(2) Ramelet A.A. et al. Epidémiologie et coûts (chapitre 5). In: Phlébologie. Ed Elsevier Masson. 5^e Ed. 2006.

(3) SFMV (Société Française de Médecine Vasculaire). Etat des lieux, perspectives d'avenir, juin 2007.

INDICATIES*

KLASSE 4

> 49 mmHg

> 65 hPa

- Ulcus cruris venosum**
- Onomkeerbare lymfoedeem
- Ernstig post-trombotisch syndroom

KLASSE 3

34 tot 46 mmHg

45 tot 61 hPa

- Ernstige trofische stoornissen
- Ulcus cruris venosum**
- Omkeerbaar lymfoedeem
- Uitgesproken spataderen met ernstige oedeemvorming

KLASSE 2

22 tot 32 mmHg

29 tot 43 hPa

- Spataderen
- Na sclerotherapie of operatie aan de spataderen
- Veneus oedeem
- Oppervlakkige en diep veneuze trombose
- Na genezing van een ulcus cruris venosum
- Lymfoedeem
- Trofische stoornissen
- Preventie van post-trombotisch syndroom (2 jaar)
- Zwangerschap en post partum (bij gekende veneuze insufficiëntie)

KLASSE 1

15 tot 22 mmHg

20 tot 29 hPa

- Zware benen
- Spataderen
- Na sclerotherapie of operatie aan de spataderen
- Zwangerschap en post partum

CONTRA-INDICATIES

- Perifeer arterieel vaatlijden in de onderste ledematen (PAD) met enkel-arm index (EAI) < 0,6
- Gevorderde diabetische microangiopathie (voor een compressie > 30 mmHg)
- Phlegmatia coerulea dolens (kritieke ischemie met veneuze obstructie)
- Septische trombose
- Bekende allergieën


Een maatname is essentieel voor het waarborgen van een aangepast compressie-niveau en een optimale effectiviteit.

De kous moet overeenstemmen met de maattabel van de fabrikant opdat het product perfect voldoet aan het compressieniveau voorgeschreven door de arts.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van de contra-indicaties en maattabel.

*HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel. Utilisation en pathologies vasculaires. Rapport. Sept 2010.

** Niet rechtsreeks gebruiken op een open wond.

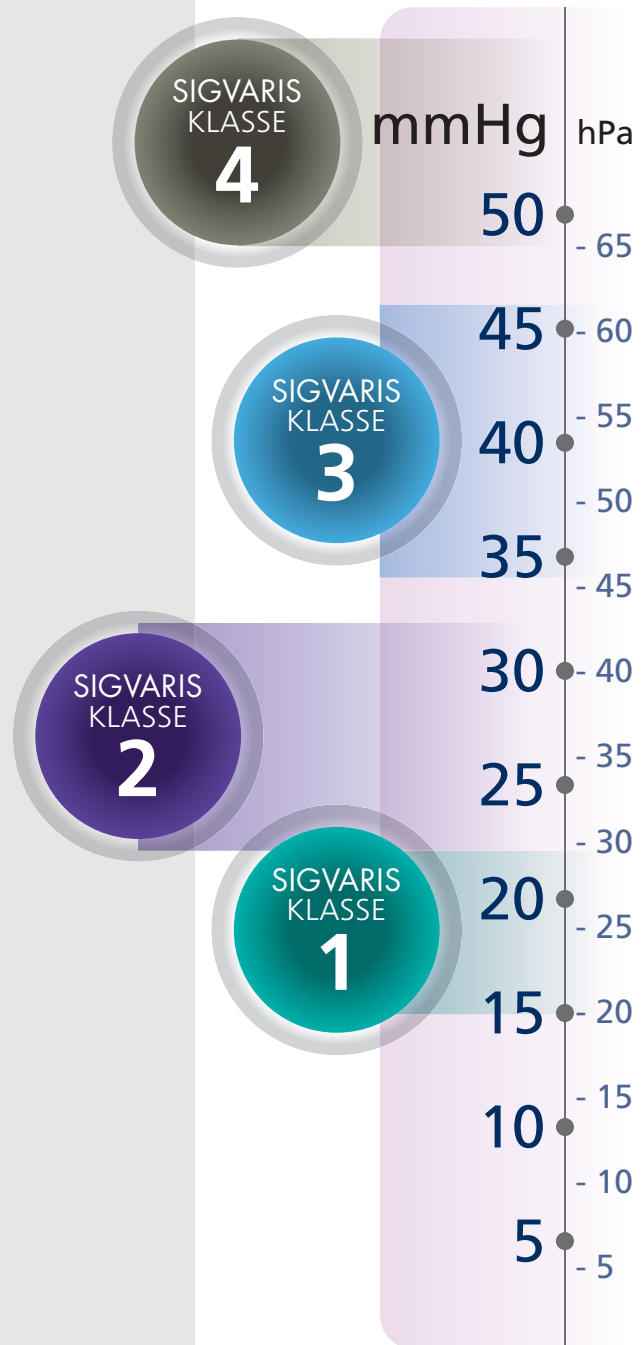

SIGVARIS

HET INTELLIGENTE TEXTIEL VAN SIGVARIS

ENGAGEMENT


KWALITEIT
100%
MADE IN EUROPE



100% EUROPESE
PRODUCTIE

ENGAGEMENT

HOOG-
TECHNOLOGISCHE
PRODUCTEN

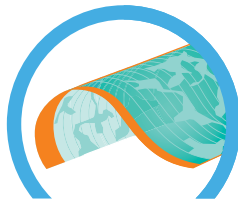

SENSINNOV®
KANT

ENGAGEMENT

AANGEPASTE
OPLOSSINGEN
VOOR
IEDEREEN




GROOT
AANBOD



ISO 9001 / 14001



MAKKELIJK
AANTREKBAAR

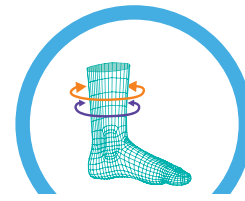

SYSTEEM VAN
MAATNAME



AANGEPASTE
MATERIALEN



AANPASSINGEN



OP MAAT

DE MEDISCHE EXPERTISE VAN SIGVARIS

ENGAGEMENT

THERAPEUTISCHE
EFFECTIVITEIT
GARANDEREN



REGELMATIGE
DEGRESSIVITEIT

ENGAGEMENT

ONDERZOEK
STIMULEREN



MEDISCH
ONDERZOEK

ENGAGEMENT

OPLEIDEN EN
SENSIBILISEREN



SENSIBILISEREN VAN
PERSONEN MET VENEUZE
INSUFFICIËNTIE



RESPECTEREN
VAN DE
AANGEKONDIGDE DRUK



SAMENWERKEN MET
DE MEDISCHE WERELD



SENSIBILISEREN
VAN VOORSCHRIJVERS:
ARTSEN BEZOEKEN

EEN COMPLEET AANBOD AAN INNOVERENDE OPLOSSINGEN...

GROOT AANBOD ESTHETISCHE KOUSEN

DIAPHANE ^{KLASSE 1} ^{KLASSE 2}
Semi-transparant



AD - AG - AT - AT ZWANGERSCHAP

INTRIGUE ^{KLASSE 1}
Netkous- en veermotief



AG - AT

GRAPHIK ^{KLASSE 1}
Streepjesmotief



AD

DIVERSE INNOVATIEVE MATERIALEN MET HOOG DRAAGCOMFORT

BAMBOU ^{KLASSE 1}
Thermoregulerend



AD

COTTON ^{KLASSE 1} ^{KLASSE 2} ^{KLASSE 3}
Uiterst zacht



AD - AG

COMFORT ^{KLASSE 1} ^{KLASSE 2} /
OPALIS ^{KLASSE 1}
Ondoorzichtig en zacht



AD - AG - AT - AT ZWANGERSCHAP

... AANGEPAST AAN DE MANNELIJKE EN VROUWELIJKE MORFOLOGIE

DUURZAME PRODUCTEN, VOOR HOGERE COMPRESSIEKLASSEN

EXPERT ^{KLASSE} 2
Makkelijk aantrekbaar



AD - AG

TRADITIONAL ^{KLASSE} 2 ^{KLASSE} 3 ^{KLASSE} 4
Natuurrubber



AD - AF - AG - AG 1-BEEN - AT

SPECIALS

ULCER X /
THROMBO X



ADVANCE /
TRADITIONAL



ROLLY
Aan- en uittrekhulp



OVERZICHT VAN HET GAMMA

DAMES

KNIEKOUS



LIESKOUS



PANTY



PANTY
ZWANGERSCHAP



KLASSE 1

DIAPHANE

Semi-transparant

- Dune
- Chocolat
- Violine
- Brume
- Noir

- Dune
- Chocolat
- Violine
- Brume
- Noir

- Dune
- Violine
- Noir

- Noir

OPALIS

Ondoorzichtig en zacht

- Miel
- Marine
- Noir

- Miel
- Marine
- Noir

- Miel
- Marine
- Noir

- Noir

INTRIGUE

Netkous- en veermotief

- Violine
- Noir

- Violine
- Noir

BAMBOU

Thermoregulerend

- Ecume
- Rosée
- Noir

KLASSE 2

DIAPHANE

Semi-transparant

- Dune
- Chocolat
- Noir

- Dune
- Chocolat
- Noir

- Dune
- Noir

EXPERT

Makkelijk aantrekbaar

- Ocre
- Noir

- Ocre
- Noir

HEREN

KNIEKOUS



LIESKOUS



KLASSE 1

INSTINCT COTON

Natuurlijk gevoel

- Sable
- Cendré
- Noir

- Noir

GRAPHIK

Streepjesmotief

- Ardoise

BAMBOU

Thermoregulerend

- Galet
- Pacifique
- Noir

KLASSE 2

INSTINCT COTON

Natuurlijk gevoel

- Sable
- Noir

- Sable
- Noir

EXPERT

Makkelijk aantrekbaar

- Chrome
- Noir

- Chrome
- Noir

UNISEKS

KNIEKOUS



DJIBEEN KOUS



LIESKOUS



LIESKOUS 1-BEEN



PANTY



KLASSE 1

COMFORT

Ondoorzichtig en zacht

- Skin
- Caramel

- Skin
- Caramel

KLASSE 2

COMFORT

Ondoorzichtig en zacht

- Skin
- Caramel
- Black

- Skin
- Caramel
- Black

COTTON

Natuurlijk gevoel

- Nature
- Black

- Nature
- Black

503 TRADITIONAL

Natuurrubber

- Beige

- Beige

- Beige

- Beige

- Beige

KLASSE 3

COTTON

Natuurlijk gevoel

- Nature

504 TRADITIONAL

Natuurrubber

- Beige

- Beige

- Beige

- Beige

KLASSE 4

505 TRADITIONAL

Natuurrubber

- Beige



MAATNAME


Een maatname is essentieel voor het waarborgen van een aangepast compressieniveau en een optimale effectiviteit.

Een maatname gebeurt best 's ochtends of na een 20-tal minuten neerliggen (met de benen verhoogd).


VOOR STANDAARD PRODUCTEN

De kous moet overeenstemmen met de maattabel van de fabrikant. Indien u op de grens van 2 maten zit, is een pasbeurt noodzakelijk.

BEENKOUSSEN

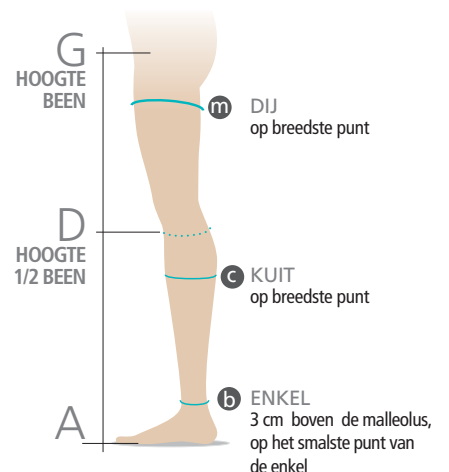

ARMKOUSSEN

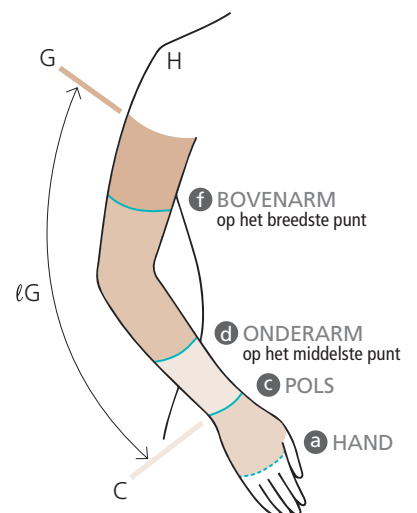

Op de productpagina's vindt u vereenvoudigde maattabellen. De uitgebreide maattabellen vindt u achteraan de catalogus.

Vallen uw maten niet binnen deze maattabellen, dan is een op maat gemaakt product noodzakelijk.

De producten die verkrijgbaar zijn 'op maat', zijn op de productpagina's aangeduid met volgend teken:



KLASSE

1

DAMES

INDICATIES*

15 tot 22 mmHg
20 tot 29 hPa


- Zware benen
- Spataderen
- Na sclerotherapie of operatie aan de spataderen
- Zwangerschap en post partum

DIAPHANE P 16
KNIKOUS - LIESKOUS - PANTY - PANTY ZWANGERSCHAP

OPALIS P 17
KNIKOUS - LIESKOUS - PANTY - PANTY ZWANGERSCHAP

INTRIGUE P 18
LIESKOUS - PANTY

BAMBOU P 19
KNIKOUS

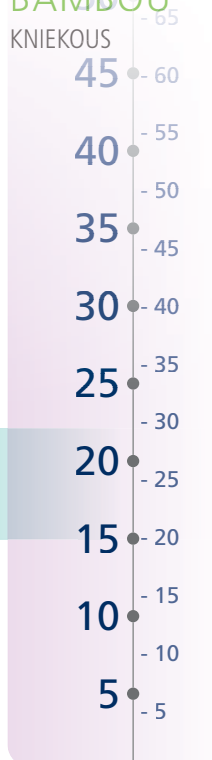

CONTRA-INDICATIES

- Perifeer arterieel vaatlijden in de onderste ledematen (PAD) met enkel-arm index (EAI) < 0,6
- Gevorderde diabetische microangiopathie (voor een compressie > 30 mmHg)
- Phlegmatia coerulea dolens (kritieke ischemie met veneuze obstructie)
- Septische trombose
- Bekende allergieën

Een maatname is essentieel voor het waarborgen van een aangepast compressieniveau en een optimale effectiviteit.

De kous moet overeenstemmen met de maattabel van de fabrikant opdat het product perfect voldoet aan het compressieniveau voorgeschreven door de arts.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van de contra-indicaties en maattabel.

*HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel. Utilisation en pathologies vasculaires. Rapport. Sept 2010.

SIGVARIS



DIAPHANE

Polyamide - Polyamide Microvezel - Elastaan
Semi-transparant

EEN EENVOUDIG TE DRAGEN GAMMA



MODELLEN



AD
Kniekous



AD
Kniekous met
open teen*



AG
Lieskous



AG
Lieskous met
open teen*



AT
Panty**



AT
Panty
zwangerschap***

KLEUREN



Dune



Chocolat



Violine



Brume



Noir

MOGELIJKE AANPASSINGEN



Open teen



Zelfklevende band
verwijderen



Omtrek kleefband
verminderen



Hoogte kleefband
verminderen

MATEN

	AANPASSING				Omtrek (cm)		Hoogte (cm)	
	ENKEL b	KUJIT MIN c-	KUJIT c	DJ MIN m-	DJ m	1/2 BEEN A-D	BEEN A-G	
XS*	17 tot 19	21 tot 29	29 tot 35	34 tot 42	37 < 42 tot 59			
S	19 tot 22	24 tot 32	32 tot 38	37 tot 45	40 < 45 tot 62			
M	22 tot 24	27 tot 35	35 tot 41	40 tot 48	42 < 48 tot 65			
L	24 tot 26	30 tot 38	38 tot 44	43 tot 51	44 < 51 tot 68			
XL	26 tot 29	33 tot 41	41 tot 47	46 tot 54	46 < 54 tot 71	NORMAAL	36-40 68-75	
XXL*	29 tot 32		44 tot 50		48 < 57 tot 74	LANG	40-44 75-82	

* Enkel verkrijgbaar in Dune en Noir.
** Niet verkrijgbaar in XS, XXL en in MIN.
*** Idem **, enkel in noir.

OPALIS

Polyamide Microvezel - Elasthaan
Ondoorzichtig en zacht

VOOR HET BESTE COMFORT



ZELFKLEVENDE
BAND
SENSINOV*



MODELLEN



AD
Kniekous



AG
Lieskous



AT
Panty



AT
Panty
zwangerschap*

KLEUREN



Miel



Marine



Noir

MOGELIJKE AANPASSINGEN



Open teen



Inkorten
(hoogte)



Zelfklevende band
verwijderen



Omtrek kleefband
verminderen



Hoogte kleefband
verminderen

MATEN

	ENKEL		KUIT	AANPASSING	OMTREK (cm)		
	b	c	c		DIJ	m	
XS	17 tot 19	29 tot 35	37 < 42		tot 59		
S	19 tot 22	32 tot 38	40 < 45		tot 62		
M	22 tot 24	35 tot 41	42 < 48		tot 65		
L	24 tot 26	38 tot 44	44 < 51		tot 68		
XL	26 tot 29	41 tot 47	46 < 54		tot 71		
XXL	29 tot 32	44 tot 50	48 < 57		tot 74		
							Hoogte (cm)
					1/2 BEEN	BEEN	
					A-D	A-G	
					NORMAAL	36-40	68-75
					LANG	40-44	75-82

* Enkel verkrijgbaar in Noir.

INTRIGUE

Polyamide - Polyamide Microvezel - Elasthaan

Netkous- en veermotief

EEN GERAFFINEERD EN MODERN MOTIEF



MODELLEN



AG
Lieskous



AT
Panty

KLEUREN



Violine



Noir

MOGELIJKE AANPASSINGEN



Zelfklevende band
verwijderen



Omtrek kleeftband
vermindern

MATEN

	AANPASSING		Omtrek (cm)		Hoogte (cm) BEEN A-G
	ENKEL b	KUIT c	DIJ m		
S	19 tot 22	32 tot 38	40 < 45 tot 58		NORMAAL 68-75 LANG 75-82
M	22 tot 24	35 tot 41	42 < 48 tot 61		
L	24 tot 26	38 tot 44	44 < 51 tot 65		
XL	26 tot 29	41 tot 47	46 < 54 tot 68		



BAMBOU

Polyamide - Viscose van bamboe - Elasthaan
Thermoregulerend

UW VOETEN IN EEN COCON



MODELLEN



AD
Kniekous

KLEUREN



Ecume



Rosé



Noir

MOGELIJKE AANPASSING



Inkorten
(hoogte)

MATEN

	Omtrek (cm)		Hoogte (cm)
	ENKEL b	KUIT c	
S	19 tot 22	32 tot 38	1/2 BEEN A-D NORMAAL 36-40 LANG 40-44
M	22 tot 24	35 tot 41	
L	24 tot 26	38 tot 44	
XL	26 tot 29	41 tot 47	



KLASSE 1
15 tot 22 mmHg - 20 tot 29 hPa

KLASSE 2 DAMES

INDICATIES*

22 tot 32 mmHg
29 tot 43 hPa

- Spataderen
- Na sclerotherapie of operatie aan de spataderen
- Veneus oedeem
- Oppervlakkige en diep veneuze trombose
- Na genezing van een ulcus cruris venosum
- Lymfoedeem
- Trofische stoornissen
- Preventie van post-trombotisch syndroom (2 jaar)
- Zwangerschap en post partum (bij gekende veneuze insufficiëntie)




DIAPHANE
KNIKOUS - LIESKOUS - PANTY

P 22

EXPERT
KNIKOUS - LIESKOUS

P 23

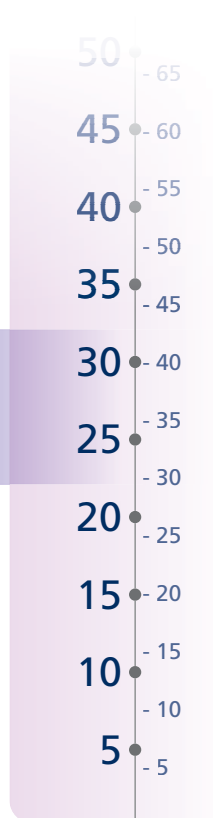

CONTRA-INDICATIES

- Perifeer arterieel vaatlijden in de onderste ledematen (PAD) met enkel-arm index (EAI) < 0,6
- Gevorderde diabetische microangiopathie (voor een compressie > 30 mmHg)
- Phlegmatia coerulea dolens (kriteieke ischemie met veneuze obstructie)
- Septische trombose
- Bekende allergieën

Een maatname is essentieel voor het waarborgen van een aangepast compressieniveau en een optimale effectiviteit.

De kous moet overeenstemmen met de maattabel van de fabrikant opdat het product perfect voldoet aan het compressieniveau voorgeschreven door de arts. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van de contra-indicaties en maattabel.

SIGVARIS

*HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel. Utilisation en pathologies vasculaires. Rapport. Sept 2010.




DIAPHANE

Polyamide - Polyamide Microvezel - Elasthaan
Semi-transparant

EEN EENVOUDIG TE DRAGEN GAMMA



● MODELLEN

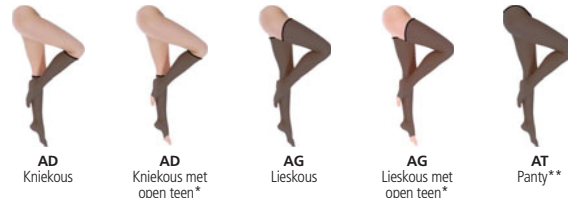

AD
Kniekous

AD
Kniekous met
open teen*

AG
Lieskous

AG
Lieskous met
open teen*

AT
Panty**

● KLEUREN



Dune

Chocolat

Noir

● MOGELIJKE AANPASSINGEN



Open teen

Zelfklevende band
verwijderen

Omtrek kleefband
verminderen

Hoogte kleefband
verminderen

● MATEN

		AANPASSING		Omtrek (cm)	Hoogte (cm)	
		ENKEL b	KUIT c	DIJ m	1/2 BEEN A-D	BEEN A-G
XS	17 tot 19	29 tot 35	37 < 42 tot 59			
S	19 tot 22	32 tot 38	40 < 45 tot 62			
M	22 tot 24	35 tot 41	42 < 48 tot 65			
L	24 tot 26	38 tot 44	44 < 51 tot 68			
XL	26 tot 29	41 tot 47	46 < 54 tot 71	NORMAAL	36-40	68-75
XXL	29 tot 32	44 tot 50	48 < 57 tot 74	LANG	40-44	75-82

* Enkel verkrijgbaar in Dune, niet in XS en XXL.

** Niet verkrijgbaar in XS en XXL, enkel in Dune en Noir.

EXPERT

Polyamide - Polyamide Microvezel - Elasthaan
Makkelijk aantrekbaar

OPTIMAAL GEBRUIKSCOMFORT



● MODELLEN



AD
Kniekous



AG
Lieskous

● KLEUREN



Ocre



Noir

● MOGELIJKE AANPASSINGEN



Open teen



Gesloten teen
+ lang



Inkorten
(hoogte)



Zelfklevende band
verwijderen



Omtrek kleeftband
verminderen



Hoogte kleeftband
verminderen

● MATEN

	AANPASSING		Omtrek (cm)
	ENKEL b	KUIT c	
XS	17 tot 19	29 tot 35	37 < 42 tot 59
S	19 tot 22	32 tot 38	40 < 45 tot 62
M	22 tot 24	35 tot 41	42 < 48 tot 65
L	24 tot 26	38 tot 44	44 < 51 tot 68
XL	26 tot 29	41 tot 47	46 < 54 tot 71
XXL	29 tot 32	44 tot 50	48 < 57 tot 74

	Hoogte (cm)	
	1/2 BEEN A-D	BEEN A-G
NORMAAL	36-40	68-75
LANG	40-44	75-82

KLASSE

1

HEREN

INDICATIES*

15 tot 22 mmHg
20 tot 29 hPa

- Zware benen
- Spataderen
- Na sclerotherapie of operatie aan de spataderen

INSTINCT COTON

KNIEKOUS - LIESKOUS

P 26

GRAPHIK


KNIEKOUS

P 27

BAMBOU

KNIEKOUS

P 28

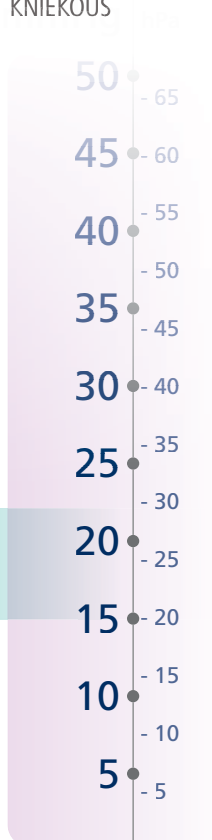

CONTRA-INDICATIES

- Perifeer arterieel vaatlijden in de onderste ledematen (PAD) met enkel-arm index (EAI) < 0,6
- Gevorderde diabetische microangiopathie (voor een compressie > 30 mmHg)
- Phlegmatia coerulea dolens (kritieke ischemie met veneuze obstructie)
- Septische trombose
- Bekende allergieën

Een maatname is essentieel voor het waarborgen van een aangepast compressieniveau en een optimale effectiviteit.

De kous moet overeenstemmen met de maattabel van de fabrikant opdat het product perfect voldoet aan het compressieniveau voorgeschreven door de arts.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van de contra-indicaties en maattabel.

SIGVARIS

*HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel. Utilisation en pathologies vasculaires. Rapport. Sept 2010.



INSTINCT COTON

Polyamide - Katoen - Viscose - Elasthaan
Natuurlijk gevoel

ELEGANTE EN ZACHTE VERZORGING



MODELLEN



AD
Kniekous

AD
Kniekous met
open teen*

AG
Lieskous*

AG
Lieskous met
open teen*

KLEUREN



Sable

Cendré

Noir

MOGELIJKE AANPASSINGEN



Gesloten teen
+ kort

Gesloten teen
+ lang

Inkorten
(hoogte)

Zelfklevende band
verwijderen

Omtrek kleeftband
verminderen

Hoogte kleeftband
verminderen

MATEN

	ENKEL		KUIT		AANPASSING	OMTREK (cm)		HOOGTE (cm)	
	b	c	c	c		dij	m	1/2 BEEN	BEEN
								A-D	A-G
S	19 tot 22	32 tot 39	32 tot 39	32 tot 39		40 <	46 tot 58		
M	22 tot 24	35 tot 42	35 tot 42	35 tot 42		42 <	50 tot 62		
L	24 tot 26	38 tot 45	38 tot 45	38 tot 45		44 <	54 tot 66		
XL	26 tot 29	41 tot 48	41 tot 48	41 tot 48		46 <	58 tot 70		
XXL	29 tot 32	44 tot 51	44 tot 51	44 tot 51		48 <	62 tot 74		
								NORMAAL	
								38-42	72-79
								LANG	
								42-46	79-86

*Niet verkrijgbaar in Cendré.



GRAPHIK

Polyamide - Elasthaan
Streepjesmotief

INNOVEREND EN GERAFFINEERD GAMMA



MODELLEN



AD
Kniekous

KLEUREN



Ardoise

MATEN

Omtrek (cm)

	ENKEL	KUIT
	b	c
S	19 tot 22	32 tot 39
M	22 tot 24	35 tot 42
L	24 tot 26	38 tot 45
XL	26 tot 29	41 tot 48
XXL	29 tot 32	44 tot 51

Hoogte (cm)

	1/2 BEEN
	A-D
NORMAAL	38-42
LANG	42-46



KLASSE 1
15 tot 22 mmHg - 20 tot 29 hPa



BAMBOU

Polyamide - Polyamide microvezel
 Viscose van bamboe- Elasthaan
 Thermoregulerend

UW VOETEN IN EEN COCON



MODELLEN



AD
Kniekous

KLEUREN



Galet



Pacifique



Noir

MOGELIJKE AANPASSING



Inkorten
(hoogte)

MATEN

	Omtrek (cm)		
	ENKEL	KUIT	
	b	c	
S	19 tot 22	32 tot 39	
M	22 tot 24	35 tot 42	
L	24 tot 26	38 tot 45	
XL	26 tot 29	41 tot 48	
XXL	29 tot 32	44 tot 51	
			Hoogte (cm)
			1/2 BEEN
			A-D
			NORMAAL 38-42
			LANG 42-46

KLASSE 2 HEREN

INDICATIES*

22 tot 32 mmHg
29 tot 43 hPa

- Spataderen
- Na sclerotherapie of operatie aan de spataderen
- Veneus oedeem
- Oppervlakkige en diep veneuze trombose
- Na genezing van een ulcus cruris venosum
- Lymfoedeem
- Trofische stoornissen
- Preventie van post-trombotisch syndroom (2 jaar)



INSTINCT COTON


KNIEKOUS - LIESKOUS

P 30

EXPERT

KNIEKOUS - LIESKOUS

P 31

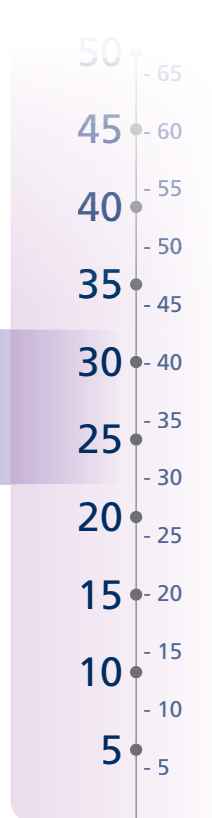

CONTRA-INDICATIES

- Perifeer arterieel vaatlijden in de onderste ledematen (PAD) met enkel-arm index (EAI) < 0,6
- Gevorderde diabetische microangiopathie (voor een compressie > 30 mmHg)
- Phlegmatia coerulea dolens (kritieke ischemie met veneuze obstructie)
- Septische trombose
- Bekende allergieën

Een maatname is essentieel voor het waarborgen van een aangepast compressieniveau en een optimale effectiviteit.

De kous moet overeenstemmen met de maattabel van de fabrikant opdat het product perfect voldoet aan het compressieniveau voorgeschreven door de arts. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van de contra-indicaties en maattabel.

SIGVARIS

*HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel. Utilisation en pathologies vasculaires. Rapport. Sept 2010.



INSTINCT COTON

Polyamide - Katoen - Viscose - Elasthaan
Natuurlijk gevoel

ELEGANTE EN ZACHTE VERZORGING



MODELLEN



AD
Kniesok



AG
Liesok

KLEUREN



Sable



Noir

MOGELIJKE AANPASSINGEN



Open teen



Inkorten
(hoogte)



Zelfklevende band
verwijderen



Omtrek kleeftband
vermindern



Hoogte kleeftband
vermindern

MATEN

	ENKEL		KUIT		AANPASSING	Omtrek (cm)		Hoogte (cm)	
	b		c			DIJ m		1/2 BEEN A-D	BEEN A-G
S	19 tot 22	32 tot 39	40 < 46	tot 58					
M	22 tot 24	35 tot 42	42 < 50	tot 62					
L	24 tot 26	38 tot 45	44 < 54	tot 66					
XL	26 tot 29	41 tot 48	46 < 58	tot 70					
XXL	29 tot 32	44 tot 51	48 < 62	tot 74					
								NORMAAL	38-42 72-79
								LANG	42-46 79-86

EXPERT

Polyamide - Polyamide Microvezel - Elasthaan
 Makkelijk aantrekbaar

OPTIMAAL GEBRUIKSCOMFORT



● MODELLEN



AD
Kniekous



AG
Lieskous

● KLEUREN



Chrome



Noir

● MOGELIJKE AANPASSINGEN



Open teen



Gesloten teen
+ lang



Inkorten
(hoogte)



Zelfklevende band
verwijderen



Omtrek kleeftband
verminderen



Hoogte kleeftband
verminderen

● MATEN

	ENKEL		KUIT	AANPASSING	OMTREK (cm)		HOOGTE (cm)	
	b	c	c		DIJ	m	1/2 BEEN	BEEN
							A-D	A-G
S	19 tot 22	32 tot 39			40 < 46 tot 58			
M	22 tot 24	35 tot 42			42 < 50 tot 62			
L	24 tot 26	38 tot 45			44 < 54 tot 66			
XL	26 tot 29	41 tot 48			46 < 58 tot 70		NORMAAL 38-42	72-79
XXL	29 tot 32	44 tot 51			48 < 62 tot 74		LANG 42-46	79-86

KLASSE

1

UNISEKS


INDICATIES*

15 tot 22 mmHg
20 tot 29 hPa

- Zware benen
- Spataderen
- Na sclerotherapie of operatie aan de spataderen
- Zwangerschap en post partum

COMFORT
KNIKOUS - LIESKOUS

P 34

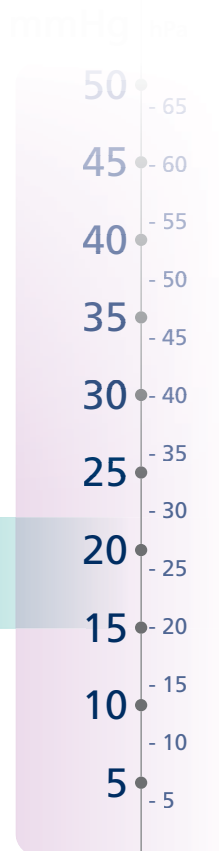

CONTRA-INDICATIES

- Perifeer arterieel vaatlijden in de onderste ledematen (PAD) met enkel-arm index (EAI) < 0,6
- Gevorderde diabetische microangiopathie (voor een compressie > 30 mmHg)
- Phlegmatia coerulea dolens (kriteieke ischemie met veneuze obstructie)
- Septische trombose
- Bekende allergieën

Een maatname is essentieel voor het waarborgen van een aangepast compressieniveau en een optimale effectiviteit.

De kous moet overeenstemmen met de maattabel van de fabrikant opdat het product perfect voldoet aan het compressieniveau voorgeschreven door de arts. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van de contra-indicaties en maattabel.

SIGVARIS

*HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel. Utilisation en pathologies vasculaires. Rapport. Sept 2010.



COMFORT

Polyamide - Elasthaan

Ondoorzichtig en zacht

VOOR HET BESTE COMFORT



ZELFKEVENDE
BAND
SENSINOV®



KNOBBED GRIP TOP



MAATWERK MOGELIJK



MODELLEN



AD
Kniekous met
open teen



AG
Lieskous met
open teen

KLEUREN



Skin



Caramel

MOGELIJKE AANPASSING



Inkorten
(lengte)



Kleefband
voorzien

MATEN

	Omtrek (cm)					Hoogte (cm)	
	ENKEL b	KUIT c	KUIT PLUS c+	DIJ m	DIJ PLUS m+		
XXS	18 tot 20	25 tot 32	29 tot 36	42 tot 52	47 tot 56	KORT	56-64
XS	20 tot 22	29 tot 36	33 tot 40	47 tot 56	52 tot 61		
S	22 tot 24	33 tot 40	35 tot 42	52 tot 61	56 tot 65	NORMAAL	35-40
M	24 tot 26	35 tot 42	38 tot 45	56 tot 65	61 tot 71		
L	26 tot 29	38 tot 45	42 tot 49	61 tot 71	66 tot 76		
XL	29 tot 32	42 tot 49	43 tot 51	66 tot 76	73 tot 85	LANG	41-45
							75-84

KLASSE **2** UNISEKS

INDICATIES*

22 tot 32 mmHg
29 tot 43 hPa

- Spataderen
- Na sclerotherapie of operatie aan de spataderen
- Veneus oedeem
- Oppervlakkige en diep veneuze trombose
- Na genezing van een ulcus cruris venosum
- Lymfoedeem
- Trofische stoornissen
- Preventie van post-trombotisch syndroom (2 jaar)
- Zwangerschap en post partum (bij gekende veneuze insufficiëntie)

SIGVARIS
KLASSE
2

CONTRA-INDICATIES

- Perifeer arterieel vaatlijden in de onderste ledematen (PAD) met enkel-arm index (EAI) < 0,6
- Gevorderde diabetische microangiopathie (voor een compressie > 30 mmHg)
- Phlegmatia coerulea dolens (kriteieke ischemie met veneuze obstructie)
- Septische trombose
- Bekende allergieën

Een maatname is essentieel voor het waarborgen van een aangepast compressieniveau en een optimale effectiviteit.

De kous moet overeenstemmen met de maattabel van de fabrikant opdat het product perfect voldoet aan het compressieniveau voorgeschreven door de arts. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van de contra-indicaties en maattabel.

COMFORT
KNIKOUS - LIESKOUS


P 36

COTTON
KNIKOUS - LIESKOUS

P 37

503 TRADITIONAL
KNIKOUS - DIJBEEN KOUS - LIESKOUS
LIESKOUS 1-BEEN - PANTY

P 38

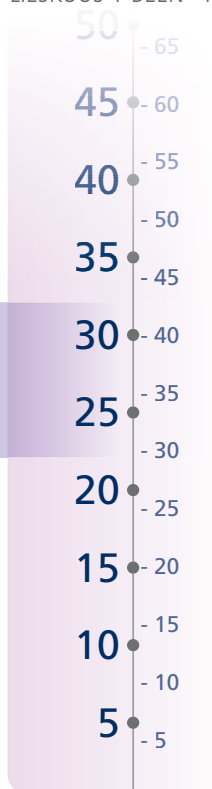

SIGVARIS

*HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel. Utilisation en pathologies vasculaires. Rapport. Sept 2010.



COMFORT

Polyamide - Elasthaan

Ondoorzichtig en zacht

VOOR HET BESTE COMFORT



ZELFKLEVENDE BAND SENSINOV®



KNOBBED GRIP TOP



MAATWERK MOGELIJK



MODELLEN



AD
Kniekous



AD
Kniekous met
open teen



AG
Lieskous



AG
Lieskous met
open teen

KLEUREN



Skin



Caramel



Black

MOGELIJKE AANPASSINGEN



Gesloten teen
+ kort



Inkorten
(lengte)



Kleefband
voorzien

MATEN

	Omtrek (cm)					Hoogte (cm)	
	ENKEL b	KUIT c	KUIT PLUS c+	DIJ m	DIJ PLUS m+	1/2 BEEN A-D	BEEN A-G
XXS	18 tot 20	25 tot 32	29 tot 36	42 tot 52	47 tot 56		
XS	20 tot 22	29 tot 36	33 tot 40	47 tot 56	52 tot 61		
S	22 tot 24	33 tot 40	35 tot 42	52 tot 61	56 tot 65		
M	24 tot 26	35 tot 42	38 tot 45	56 tot 65	61 tot 71	KORT	56-64
L	26 tot 29	38 tot 45	42 tot 49	61 tot 71	66 tot 76	NORMAAL	35-40
XL	29 tot 32	42 tot 49	43 tot 51	66 tot 76	73 tot 85	LANG	41-45
							75-84

COTTON

Polyamide - katoen - Elasthaan
Natuurlijk gevoel

ELEGANTE EN ZACHTE VERZORGING



MODELLEN



AD
Kniekous



AD
Kniekous met
open teen



AG
Lieskous



AG
Lieskous met
open teen

KLEUREN



Nature



Black

MOGELIJKE AANPASSINGEN



Gesloten teen
+ kort



Inkorten
(lengte)



Kleefband
voorzien

MATEN

	Omtrek (cm)				
	ENKEL b	KUIT c	KUIT PLUS c+	DIJ m	DIJ PLUS m+
XXS	18 tot 20	25 tot 32	29 tot 36	42 tot 52	47 tot 56
XS	20 tot 22	29 tot 36	33 tot 40	47 tot 56	52 tot 61
S	22 tot 24	33 tot 40	35 tot 42	52 tot 61	56 tot 65
M	24 tot 26	35 tot 42	38 tot 45	56 tot 65	61 tot 71
L	26 tot 29	38 tot 45	42 tot 49	61 tot 71	66 tot 76
XL	29 tot 32	42 tot 49	43 tot 51	66 tot 76	73 tot 85

	Hoogte (cm)	
	1/2 BEEN A-D	BEEN A-G
KORT	31-34	56-64
NORMAAL	35-40	65-74
LANG	41-45	75-84



503 TRADITIONAL

Polyamide - Elasthaan

Natuurrubber

OPTIMALE DOELTREFFENDHEID



MODELLEN



AD
Kniekous met open teen



AF
Dijbeen kous met open teen



AG
Lieskous met open teen



AG
Lieskous 1-been met open teen



AT
Panty met open teen*

KLEUREN



Beige

MOGELIJKE AANPASSING**



Inkorten (lengte)



Kleefband voorzien

MATEN

	Omtrek (cm)				
	ENKEL b	KUIT c	KUIT PLUS C+	DIJ m	DIJ PLUS m+
XS	17 tot 19	28 tot 31			
S	19 tot 23	31 tot 36	35 tot 40	42 tot 52	50 tot 60
M	23 tot 26	34 tot 39	39 tot 44	50 tot 60	58 tot 68
L	26 tot 29	37 tot 42	43 tot 48	58 tot 68	66 tot 76
XL	29 tot 32	40 tot 45	47 tot 52		

	Hoogte (cm)	
	1/2 BEEN A-D	BEEN A-G
KORT	33-37	61-70
LANG	38-44	71-80

*Enkel verkrijgbaar in PLUS.

** Specifieke aanpassingen: AG lengte heupbevestiging aanpassen; AT stoma- of kruisopening voorzien/aanpassen.

KLASSE **3** UNISEKS

INDICATIES*

34 tot 46 mmHg
45 tot 61 hPa

- Ernstige trofische stoornissen
- Ulcus cruris venosum**
- Omkeerbaar lymfoedeem
- Uitgesproken spataderen met ernstige oedeemvorming




COTTON
KNIKOUS

P 40

504 TRADITIONAL
KNIKOUS - DIJBEEN KOUS - LIESKOUS
LIESKOUS 1-BEEN

P 41

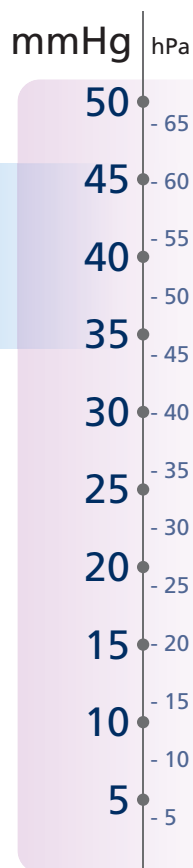

CONTRA-INDICATIES

- Perifeer arterieel vaatlijden in de onderste ledematen (PAD) met enkel-arm index (EAI) < 0,6
- Gevorderde diabetische microangiopathie (voor een compressie > 30 mmHg)
- Phlegmatia coerulea dolens (kritieke ischemie met veneuze obstructie)
- Septische trombose
- Bekende allergieën

Een maatname is essentieel voor het waarborgen van een aangepast compressieniveau en een optimale effectiviteit.

De kous moet overeenstemmen met de maattabel van de fabrikant opdat het product perfect voldoet aan het compressieniveau voorgeschreven door de arts. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van de contra-indicaties en maattabel.

*HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel. Utilisation en pathologies vasculaires. Rapport. Sept 2010.
**Niet rechtstreeks gebruiken op een open wond.

SIGVARIS



COTTON

Polyamide - katoen - Elasthaan
Natuurlijk gevoel

ELEGANTE EN ZACHTE VERZORGING



MODELLEN



AD
Kniekous met
open teen

KLEUREN



Nature

MOGELIJKE AANPASSING



Inkorten
(lengte)



Kleefband
voorzien

MATEN

	Omtrek (cm)		
	ENKEL b	KUIT c	KUIT PLUS C+
XXS	18 tot 20	25 tot 32	29 tot 36
XS	20 tot 22	29 tot 36	33 tot 40
S	22 tot 24	33 tot 40	35 tot 42
M	24 tot 26	35 tot 42	38 tot 45
L	26 tot 29	38 tot 45	42 tot 49
XL	29 tot 32	42 tot 49	43 tot 51

Hoogte (cm)

1/2 BEEN
A-D

NORMAAL 35-40

LANG 41-45



504 TRADITIONAL

Polyamide - Elasthaan
Natuurrubber

OPTIMALE DOELTREFFENDHEID



MODELLEN



AD
Kniekous met open teen



AF
Dijbeen kous met open teen



AG
Lieskous met open teen



AG
Lieskous 1-been met open teen*

KLEUREN



Beige

MOGELIJKE AANPASSING**



Inkorten (lengte)



Kleefband voorzien

MATEN

	Omtrek (cm)					Hoogte (cm)		
	ENKEL b	KUIT c	KUIT PLUS c+	DIJ m	DIJ PLUS m+	1/2 BEEN A-D		BEEN A-G
S	19 tot 23	31 tot 36	35 tot 40	42 tot 52	50 tot 60			
M	23 tot 26	34 tot 39	39 tot 44	50 tot 60	58 tot 68			
L	26 tot 29	37 tot 42	43 tot 48	58 tot 68	66 tot 76			
XL	29 tot 32	40 tot 45	47 tot 52			KORT	33-37	61-70
						LANG	38-44	71-80

* Enkel verkrijgbaar in PLUS.

** Specifieke aanpassing: AG lengte heupbevestiging aanpassen.

KLASSE

4

UNISEKS

INDICATIES*

> 49 mmHg


> 65 hPa

- Ulcus cruris venosum**
- Onomkeerbare lymfoedeem
- Ernstig post-trombotisch syndroom

505 TRADITIONAL

KNIEKOUS

P 44

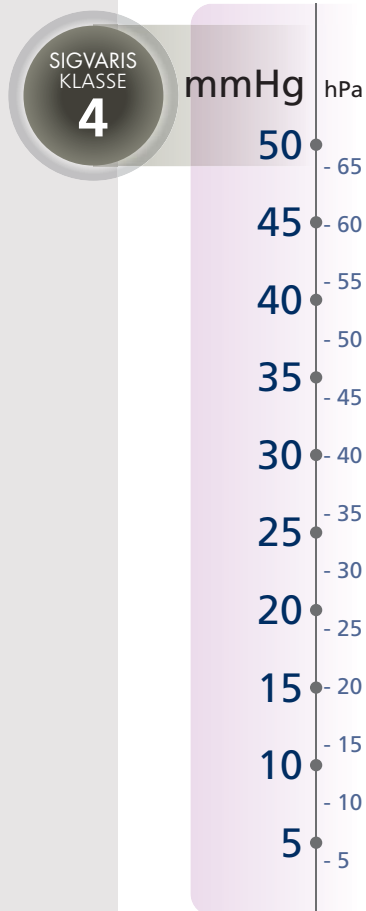

CONTRA-INDICATIES

- Perifeer arterieel vaatlijden in de onderste ledematen (PAD) met enkel-arm index (EAI) < 0,6
- Gevorderde diabetische microangiopathie (voor een compressie > 30 mmHg)
- Phlegmatia coerulea dolens (kritieke ischemie met veneuze obstructie)
- Septische trombose
- Bekende allergieën

Een maatname is essentieel voor het waarborgen van een aangepast compressieniveau en een optimale effectiviteit.

De kous moet overeenstemmen met de maattabel van de fabrikant opdat het product perfect voldoet aan het compressieniveau voorgeschreven door de arts.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van de contra-indicaties en maattabel.

*HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel. Utilisation en pathologies vasculaires. Rapport. Sept 2010.

**Niet rechtstreeks gebruiken op een open wond.

SIGVARIS



505 TRADITIONAL

Polyamide - Elasthaan

Natuurrubber

OPTIMALE DOELTREFFENDHEID



MODELLEN



AD
Kniekous met
open teen

KLEUREN



Beige

MOGELIJKE AANPASSING



Inkorten
(lengte)



Kleefband
voorzien

MATEN

	Omtrek (cm)			Hoogte (cm)
	ENKEL b	KUIT c	KUIT PLUS c+	
S	19 tot 23	31 tot 36	35 tot 40	1/2 BEEN A-D KORT 33-37 LANG 38-44
M	23 tot 26	34 tot 39	39 tot 44	
L	26 tot 29	37 tot 42	43 tot 48	

SPECIALS

SPECIALE KOUSEN

ULCER X KIT	P 46
THROMBO-X	P 47

ARMKOUSSEN

TRADITIONAL	P 48
ADVANCE	P 49

ACCESSOIRES

ROLLY	P 50
ANTISLIP MATJE	P 50
CONE	P 50
RUBBEREN HANDSCHOENEN	P 51
HUIDLIJM "IT STAYS"	P 51

SIGVARIS

ULCER X KIT


Polyamide - Elasthaan - katoen / Polyamide - Elasthaan

BEHANDELEN VAN ULCUS CRURIS (open been)

VOORDELEN ULCER X KIT T.O.V. KLASSIEKE ZWACHTELS:

- Bewezen snellere genezing*
- Makkelijk aan- en uit te trekken
- Natuurlijke onderkous voelt prettig op de huid
- Comfortabel en discreet, ook in schoenen
- De juiste compressie op de juiste plaats
- De pleister blijft ook 's nachts stevig op zijn plaats dankzij de gepatenteerde onderkous

KIT BEVAT:

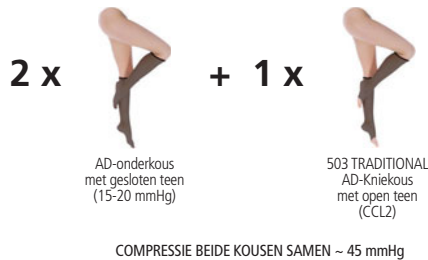

KLEUREN



MATEN

	Omtrek (cm)			Hoogte (cm)
	ENKEL b	KUIT c	KUIT PLUS c+	
S	19 tot 23	31 tot 36	35 tot 40	1/2 BEEN A-D
M	23 tot 26	34 tot 39	39 tot 44	
L	26 tot 29	37 tot 42	43 tot 48	KORT 33-37
XL	29 tot 32	40 tot 45	47 tot 52	
				LANG 38-44

* The treatment of venous legs ulcers with a specially designed compression stocking kit compression with bandaging. F. Mariani et al. Phlebologie 2008; 37: 191-197.

THROMBO-X

Polyamide - Elasthaan

PREVENTIE VAN TROMBOSE

DE THROMBO-X WORDT GEBRUIKT:*

- Na een orthopedische ingreep
- Bij trauma van het onderbeen
- Bij langdurige immobiliteit

KARAKTERISTIEKEN:

- Degressieve compressie van 18 mmHg op enkelniveau (HATRA)
- Ademend materiaal, bevordert het thermisch evenwicht
- Huidvriendelijk
- Zacht en soepel, eenvoudig aan te trekken
- Kreukvrij en comfortabel, zakt niet af
- Voorzien van versterkte hiel en inspectieopening

● MODELLEN



AD
Kniekous met inspectieopening



AG
Lieskous met anti-slip board en inspectieopening



AG
Lieskous 1-been met verstelbare heupbevestiging en inspectieopening

● KLEUREN



White

● MATEN

	Omtrek (cm)		
	ENKEL b	KNIE- HOLTE d	DIJ m
S	18 tot 22	29 tot 35	43 tot 54
M	22 tot 26	34 tot 40	48 tot 60
L	26 tot 29	39 tot 45	54 tot 66
XL	29 tot 32	44 tot 51	60 tot 72

	Hoogte (cm)	
	1/2 BEEN A-D	BEEN A-G
KORT	33-38	60-70
NORMAAL	38-43	70-80
LANG	43-48	80-90



*Contra-indicaties: Dermatitis, Arteriële aandoeningen, Open wonden.

TRADITIONAL

Polyamide - Elasthan

ARMKOUS UIT NATUURLIJK RUBBER

INDICATIES:*

- Voorkomen en behandelen van lymfoedeem
- Behandeling van postmastectomie oedeem na radiotherapie
- Post-operatief en post-traumatisch oedeem na voltooiing van de basisbehandeling
- Polyartritis (in sommige gevallen)
- Behandeling van brandwonden en zware littekens

KARAKTERISTIEKEN:

- Met of zonder handschoen
- Met support strap of kleeftop (Knobbed grip top)
- Verkrijgbaar in 1 compressieklasse: 23 - 32 mmHg



MODELLEN



AH
Armkoos met handschoen en support strap



AG
Armkoos met handschoen en kleeftop



CH
Armkoos zonder handschoen met support strap



CG
Armkoos zonder handschoen met kleeftop

KLEUREN



Beige

MATEN

	Omtrek (cm)				Hoogte (cm)
	POLS c	ONDER-ARM d	BOVEN-ARM f		LG
S	13 tot 16	20 tot 24	24 tot 30		
M	16 tot 19	24 tot 28	30 tot 36	KORT	40-46
L	19 tot 22	28 tot 32	36 tot 42	LANG	46-52

*Contra-indicaties: niet-gereduceerd lymfoedeem, ontsteking.

ADVANCE

Polyamide - Elasthaan - MicroModal

ANTIBACTERIËLE ARMKOUS

INDICATIES:*

- **14 - 18 mmHg:** profylaxe, milde lymfoedeem, ISL stadium I - II, geen misvorming, onderhoud, verzachting.
- **20 - 25 mmHg:** middelmatig lymfoedeem, ISL stadium II - III, enige misvorming.


KARAKTERISTIEKEN:

- Met of zonder handschoen
- Met en zonder kleefboord (Sensinova grib top)
- Bacteriostatisch en thermoregulerend
- Verkrijgbaar in 2 compressieklassen:
14 - 18 mmHg en **20 - 25 mmHg**

MODELLEN



AG
Armkoos met handschoen zonder kleefboord

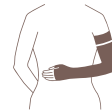

AG
Armkoos met handschoen en kleefboord



CG
Armkoos zonder handschoen zonder kleefboord



CG
Armkoos zonder handschoen met kleefboord

KLEUREN



Naturel



Noir

MATEN

	Omtrek (cm)				
	HAND** a	POLS c	BOVENARM f	BOVENARM PLUS f+	
XS	16 tot 20	13 tot 14	24 tot 32	32 tot 38	
S	17 tot 21	14 tot 16	26 tot 34	34 tot 40	
M	18 tot 22	16 tot 18	29 tot 37	37 tot 43	
L	19 tot 23	18 tot 20	32 tot 40	40 tot 46	
XL	20 tot 24	20 tot 23	34 tot 42	42 tot 48	
					Hoogte (cm)
					LG
					KORT < 43
					LANG > 43

*Contra-indicaties: uitgesproken of niet-gereduceerd lymfoedeem, ontsteking.
** Enkel voor armkousen MET handschoen.

ACCESSOIRES

ROLLY




Verpakt in opbergzak!

Aan- en uittrekhulp voor het moeiteloos en comfortabel aan- en uittrekken van compressiekousen.

Alleen of met behulp van een derde te gebruiken, kan zonder handen gebruikt worden! Het geribbeld oppervlak laat toe de kous zonder beschadiging te positioneren.

Licht, compact en flexibel, makkelijk mee te nemen.

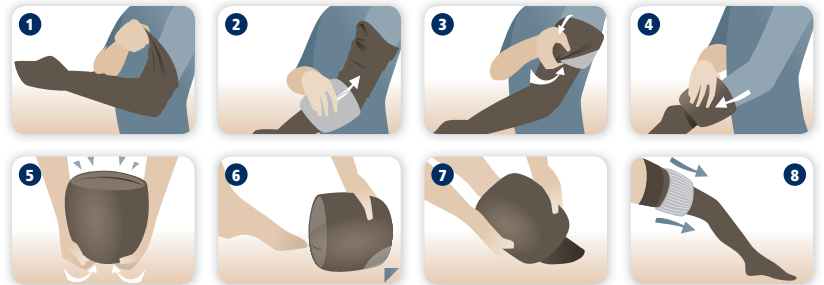

ANTISLIP MATJE

Flexibel membraan met “klevend” oppervlak. Vereenvoudigt het gebruik van de Rolly en maakt hem toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit.

CONE

Met de “Cone” rolt u gemakkelijk een compressiekous op en af de Rolly. De kegel heeft een zuignap zodat hij goed hecht aan vlakke oppervlakken zoals bijvoorbeeld een tafel.



ACCESSOIRES

RUBBEREN HANDSCHOENEN



Rubberen handschoenen maken het aan- en uittrekken, alsook het vorm geven, van compressiekousen makkelijker. Ze beschermen de kous en zorgen voor een langere levensduur.

Verkrijgbaar in: Small, Medium en Large.

HUIDLIJM "IT STAYS"



"It Stays" is een speciale lijmroller voor het bevestigen van compressiekousen zonder kleefboord op de huid. Geschikt voor zowel arm- als beenkousen. De lijm is zacht en soepel voor de huid. "It Stays" is met water afwasbaar en laat geen vlekken achter.


Verkrijgbaar in: 60ml flacon.

MAATTABELLEN

	Lengte (cm)				Schoenmaat		
	LD		LG		NORMAAL	DAMES	HEREN
NORMAAL	DAMES 36 - 40	HEREN 38 - 42	DAMES 68 - 75	HEREN 72 - 79	NORMAAL	DAMES 36 - 40	HEREN 40 - 43
LANG	40 - 44	42 - 46	75 - 82	79 - 86	LANG	37 - 41	43 - 46

DAMES

DIAPHANE* - OPALIS* - EXPERT F

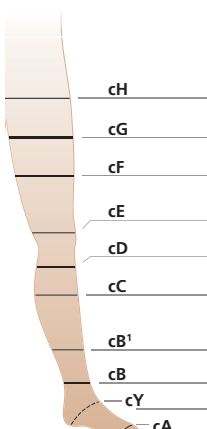


	XS -	XS	S -	S	M -	M	L -	L	XL -	XL	XXL
cH comfort				105 - 130		115 - 140		125 - 150		125 - 150	
cH				tot 105		tot 115		tot 125		tot 125	
cG	34 - 42	42 - 59	37 - 45	45 - 62	40 - 48	48 - 65	43 - 51	51 - 68	46 - 54	54 - 71	57 - 74
cF	27 - 35	35 - 52	32 - 40	40 - 57	35 - 43	43 - 60	38 - 45	45 - 62	42 - 47	47 - 64	52 - 69
cE	23 - 31	31 - 41	28 - 36	36 - 46	29 - 37	37 - 47	31 - 38	38 - 48	35 - 40	40 - 50	44 - 54
cD	19 - 27	27 - 36	22 - 33	30 - 39	25 - 36	33 - 42	28 - 39	35 - 44	31 - 42	37 - 46	41 - 49
cC	21 - 29	29 - 35	24 - 32	32 - 38	27 - 35	35 - 41	30 - 38	38 - 44	33 - 41	41 - 47	44 - 50
cB ¹	18 - 22	22 - 27	20 - 24	24 - 29	23 - 27	27 - 32	25 - 30	30 - 35	27 - 33	33 - 38	36 - 41
cB	17 - 19	17 - 19	19 - 22	19 - 22	22 - 24	22 - 24	24 - 26	24 - 26	26 - 29	26 - 29	29 - 32
cY	26 - 29	26 - 29	28 - 31	28 - 31	31 - 34	31 - 34	33 - 36	33 - 36	35 - 38	35 - 38	38 - 41
cA	17 - 19	17 - 19	19 - 22	19 - 22	22 - 24	22 - 24	24 - 26	24 - 26	26 - 29	26 - 29	29 - 32

* comfort (zwangerschap) enkel verkrijgbaar in Diaphane KLASSE 1 en Opalis.
 "-“ enkel verkrijgbaar in Diaphane KLASSE 1.

HEREN

INTRIGUE* - BAMBOU F*

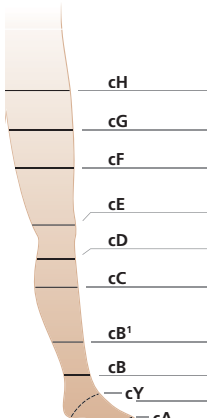

	S	M	L	XL
cH	tot 105	tot 115	tot 125	tot 125
cG	45 - 58	48 - 61	51 - 65	54 - 68
cF	40 - 51	43 - 54	45 - 56	47 - 58
cE	36 - 41	37 - 42	38 - 43	40 - 45
cD	30 - 37	33 - 40	35 - 42	37 - 44
cC	32 - 38	35 - 41	38 - 44	41 - 47
cB ¹	24 - 29	27 - 32	30 - 35	33 - 38
cB	19 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 29
cY	28 - 31	31 - 34	33 - 36	35 - 38
cA	19 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 29

* Intrigue: niet verkrijgbaar in AD-kous.
 * Bambou F: enkel verkrijgbaar in AD-kous.

INSTINCT COTON - GRAPHIK* EXPERT M - BAMBOU M*

	S	M	L	XL	XXL
cG	46 - 58	50 - 62	54 - 66	58 - 70	62 - 74
cF	40 - 51	44 - 55	48 - 59	52 - 63	56 - 67
cE	36 - 41	37 - 42	40 - 47	43 - 50	45 - 52
cD	30 - 37	33 - 40	36 - 43	39 - 46	41 - 48
cC	32 - 39	35 - 42	38 - 45	41 - 48	44 - 51
cB ¹	24 - 29	27 - 32	30 - 35	33 - 38	36 - 41
cB	19 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 29	29 - 32
cY	28 - 31	31 - 34	33 - 36	35 - 38	38 - 41
cA	19 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 29	29 - 32


* Bambou M - Graphik: enkel verkrijgbaar in AD-kous.

MAATTABELLEN

	Lengte (cm)				Schoenmaat
	D		G		
	COM. / COT.	TRAD.	COM. / COT.	TRAD.	
KORT	31 - 34	33 - 37	56 - 64	61 - 70	KORT 37 - 42
NORMAAL	35 - 40	/	65 - 74	/	NORMAAL 39 - 44
LANG	41 - 45	38 - 44	75 - 84	71 - 80	LANG 41 - 46


UNISEKS

COMFORT - COTTON

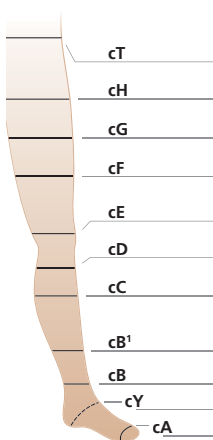

		XXS	XXS +	XS	XS +	S	S +	M	M +	L	L +	XL	XL +
cT	cT	60 - 75	65 - 80	65 - 80	75 - 90	75 - 90	85 - 100	85 - 100	95 - 110	95 - 110	105 - 120	105 - 120	115 - 130
cH	cH	75 - 90	80 - 95	80 - 95	85 - 100	85 - 100	95 - 110	95 - 110	105 - 120	105 - 120	115 - 130	115 - 130	125 - 140
cG	cG bande sil.	42 - 52	47 - 56	47 - 56	52 - 61	52 - 61	56 - 65	56 - 65	61 - 71	61 - 71	66 - 76	66 - 76	73 - 85
cF	cF	38 - 49	41 - 52	41 - 52	44 - 55	44 - 55	49 - 60	49 - 60	53 - 64	53 - 64	59 - 70	59 - 70	63 - 78
cE	cE	29 - 36	33 - 40	33 - 40	37 - 44	37 - 44	39 - 46	39 - 46	41 - 48	41 - 48	45 - 52	45 - 52	46 - 53
cD	cD	23 - 30	27 - 34	27 - 34	31 - 38	31 - 38	34 - 41	34 - 41	37 - 44	37 - 44	41 - 48	41 - 48	42 - 50
cC	cC	25 - 32	29 - 36	29 - 36	33 - 40	33 - 40	35 - 42	35 - 42	38 - 45	38 - 45	42 - 49	42 - 49	43 - 51
cB ¹	cB ¹	22 - 26	22 - 26	24 - 29	24 - 29	26 - 32	26 - 32	29 - 35	29 - 35	31 - 37	31 - 37	33 - 39	33 - 39
cB	cB	18 - 20	18 - 20	20 - 22	20 - 22	22 - 24	22 - 24	24 - 26	24 - 26	26 - 29	26 - 29	29 - 32	29 - 32
cY	cY	27 - 31	27 - 31	28 - 33	28 - 33	29 - 35	29 - 35	31 - 37	31 - 37	32 - 38	32 - 38	33 - 39	33 - 39
cA	cA	18 - 20	18 - 20	20 - 22	20 - 22	22 - 24	22 - 24	24 - 26	24 - 26	26 - 29	26 - 29	29 - 32	29 - 32

TRADITIONAL

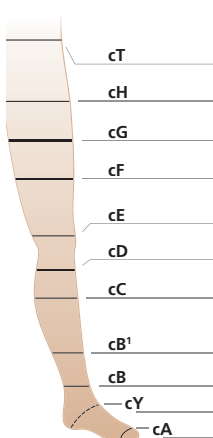

		XS	S	S +	M	M +	L	L +	XL	XL +
cT	cT		tot 80	tot 80	tot 90	tot 90	tot 100	tot 100		
cH	cH		tot 110	tot 110	tot 120	tot 120	tot 130	tot 130		
cG	cG	40 - 50	42 - 52	50 - 60	50 - 60	58 - 68	58 - 68	66 - 76	61 - 71	69 - 79
cF	cF	39 - 48	41 - 50	45 - 54	48 - 57	53 - 62	55 - 64	61 - 70	58 - 67	64 - 73
cE	cE	29 - 34	32 - 37	36 - 41	35 - 40	40 - 45	38 - 43	44 - 49	41 - 46	48 - 53
cD	cD	26 - 32	28 - 34	32 - 38	31 - 37	36 - 42	34 - 40	40 - 46	38 - 43	44 - 49
cC	cC	28 - 31	31 - 36	35 - 40	34 - 39	39 - 44	37 - 42	43 - 48	40 - 45	47 - 52
cB ¹	cB ¹	21 - 24	24 - 29	24 - 29	29 - 32	29 - 32	32 - 36	32 - 36	35 - 39	35 - 39
cB	cB	17 - 19	19 - 23	19 - 23	23 - 26	23 - 26	26 - 29	26 - 29	29 - 32	29 - 32
cY	cY	25 - 28	28 - 32	28 - 32	32 - 35	32 - 35	35 - 38	35 - 38	38 - 41	38 - 41
cA	cA	17 - 19	19 - 23	19 - 23	23 - 26	23 - 26	26 - 29	26 - 29	29 - 32	29 - 32



SIGVARIS

Verdeeld in België door:



VITAMED

Jan Samijnstraat 23
B-9050 Gentbrugge

T +32 (0)52 25 94 10
F +32 (0)52 25 94 19
info@vitamed.be

www.vitamed.be